




Краткое руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1 Общие сведения
- 2 Подготовка контура
- 3 Экран «Настройки»
- 4 Настройка параметров предписания

1

Общие сведения

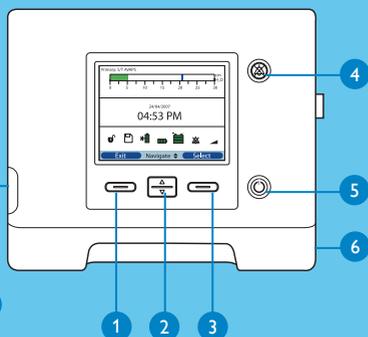

- 1 Отмена операции или выход из меню
- 2 Перемещение по меню или изменение параметров
- 3 Выбор/изменение/подтверждение параметров
- 4 Кнопка паузы звукового сигнала
- 5 Кнопка пуска/стоп
- 6 Разъем питания переменного тока
- 7 Карта памяти SD для загрузки данных вентиляции



Символьные обозначения и пиктограммы



Режим полного доступа



Наличие карты SD в аппарате вентиляции



Включенная пауза звукового сигнала



Включенная функция линейного изменения давления



Состояние дополнительной съемной батареи



Состояние внутренней батареи



Состояние внешней батареи




Выполняется зарядка батареи

2

Подготовка контура


Перед эксплуатацией прибора Trilogy202 необходимо настроить тип контура.

Пассивный контур выдыхательного клапана

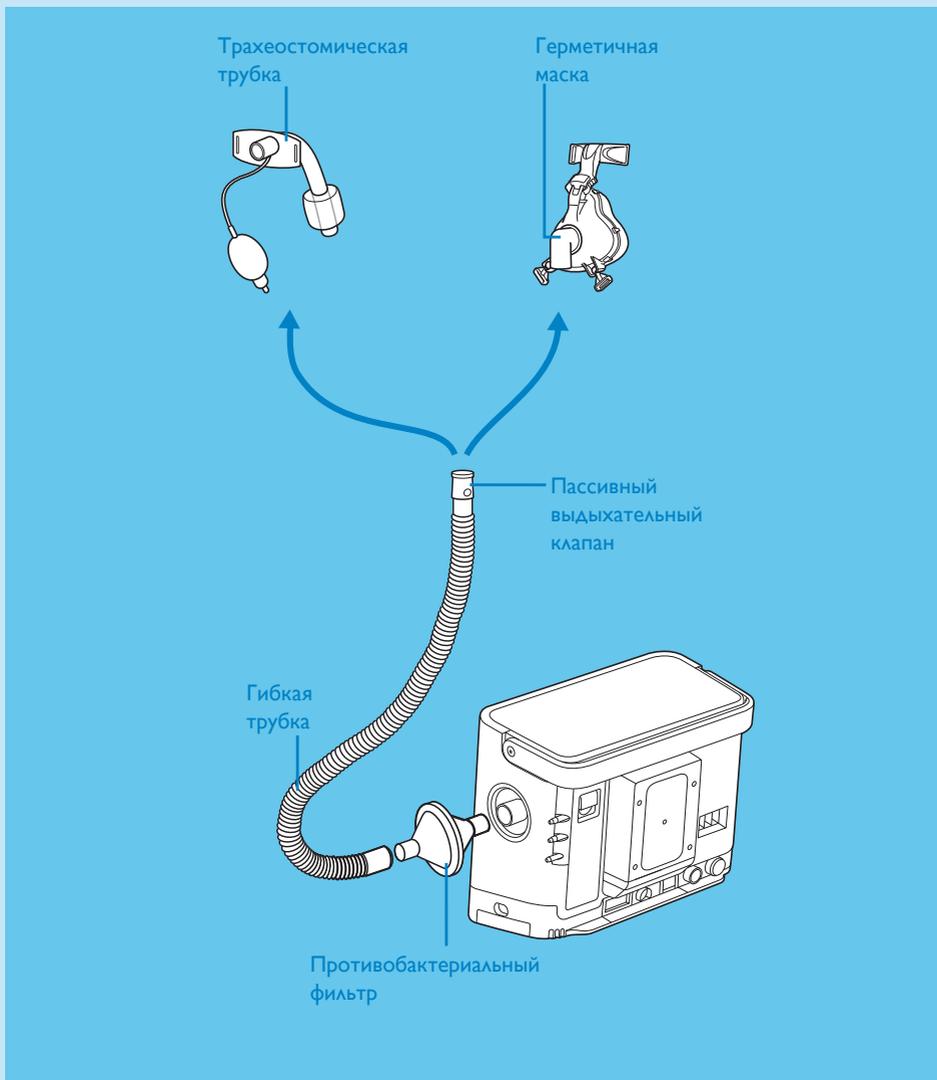


На экране «Setup» (Настройка) выберите значение «Passive» (Пассивный) для типа контура.

Активный выдыхательный клапан с контуром поддержания верхнедолевого давления

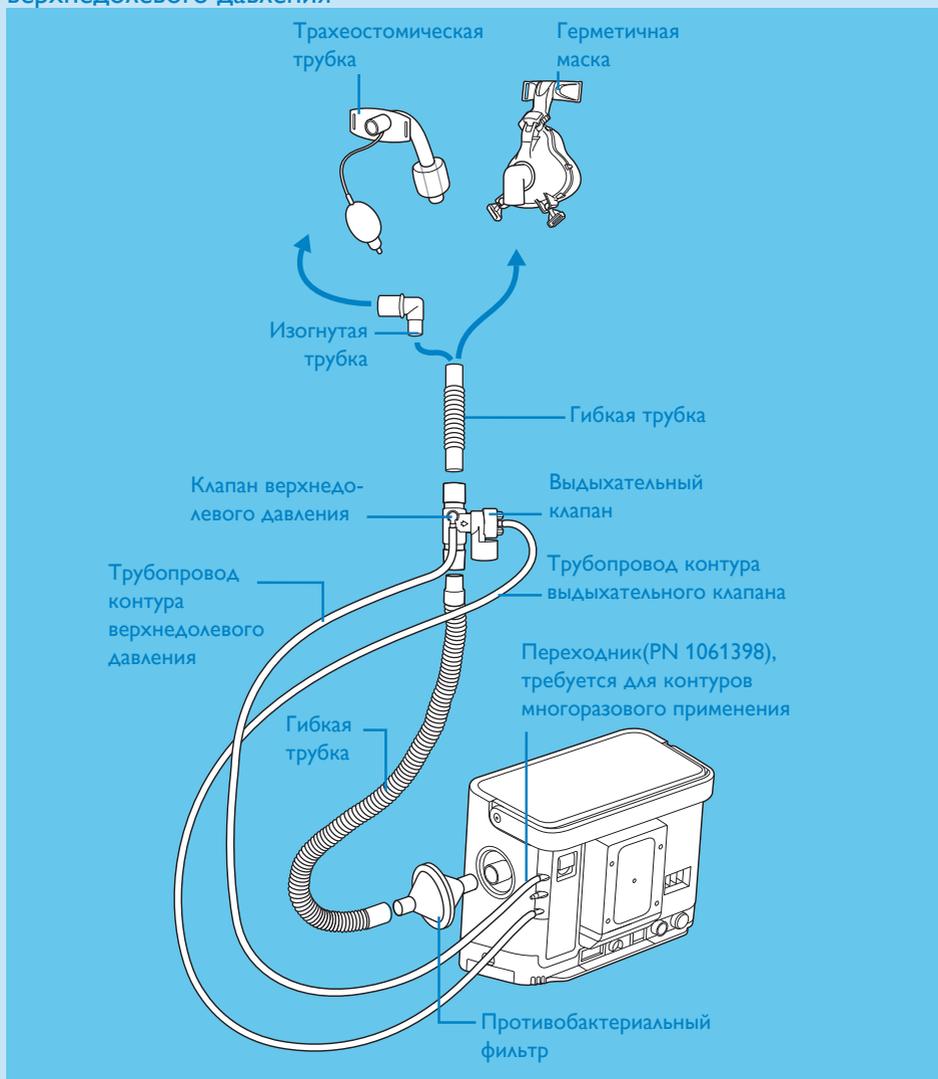

На экране «Setup» (Настройка) выберите значение «Active PEEP» (Активный контур с поддержкой положительного верхнедолевого давления воздуха) для типа контура.

Контур датчика потока активного выдыхательного контура

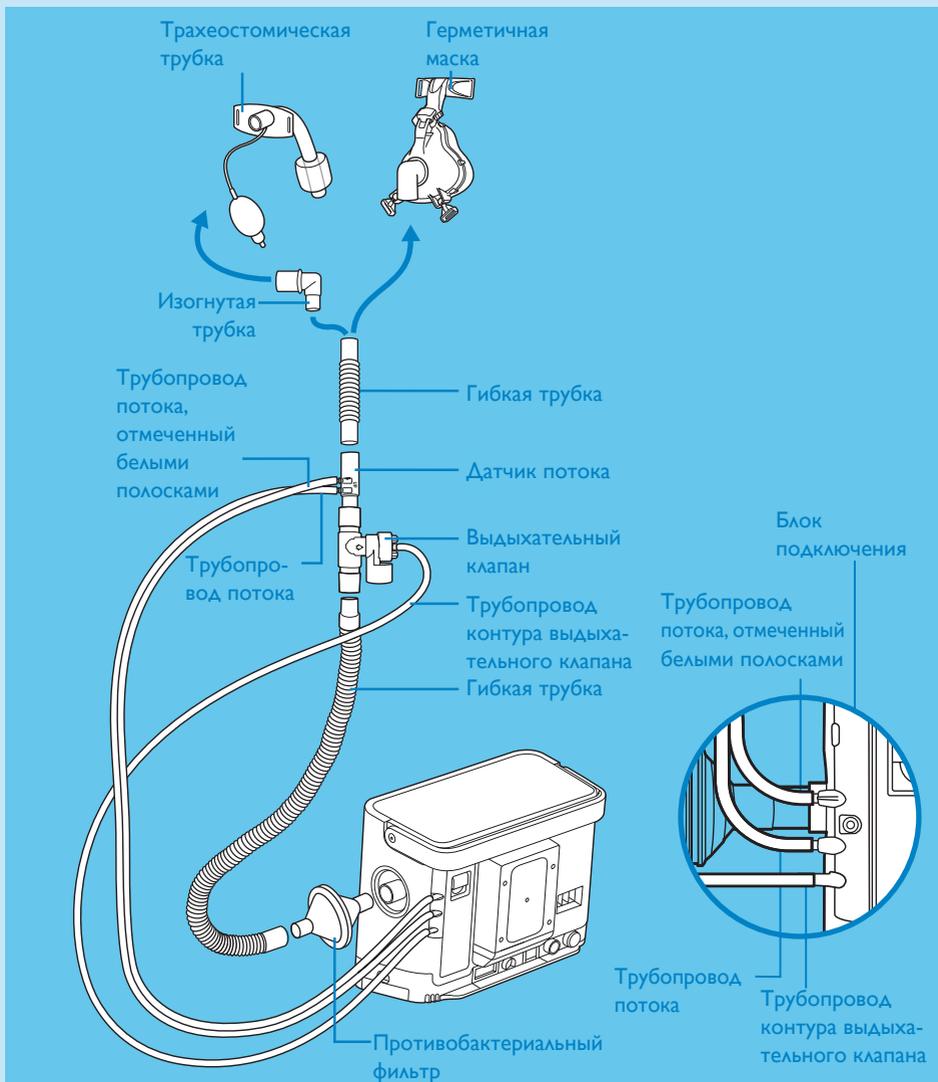


На экране «Setup» (Настройка) выберите значение «Active flow» (Активный контур потока) для типа контура.

3


Экран «Настройки»

Настройка типа контура (активного или пассивного)


Перед выполнением дальнейших действий убедитесь в том, что аппарат Trilogy 202 выключен

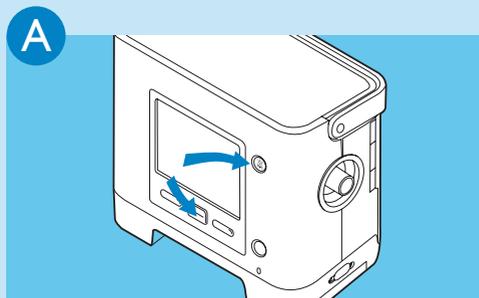


Для доступа к экрану **Setup** (Настройка) нажмите и удерживайте  и  в течение нескольких секунд

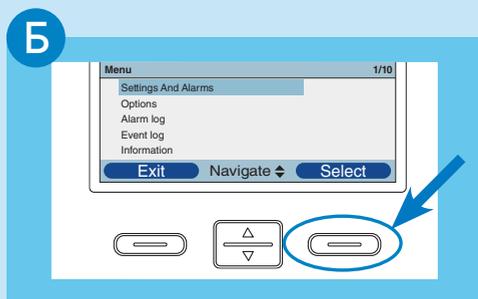

Выберите пункт **Settings And Alarms** (Параметры настройки и сигналов оповещения)

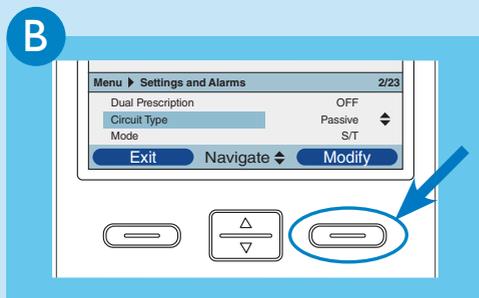


Перейдите к пункту **Circuit Type** (Тип контура) и нажмите **Modify** (Изменение параметров)

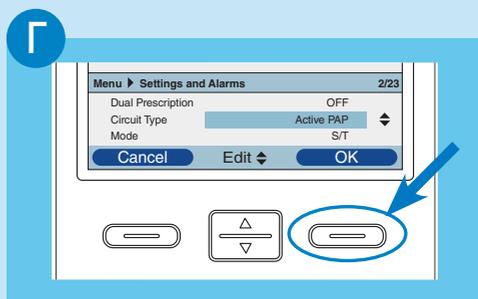


При помощи  выберите вариант **Active PAP** (Активный контур с поддержкой положительного давления воздуха), **Active flow** (Активный контур потока) или **Passive** (Пассивный), после чего дважды нажмите **OK** (OK) для подтверждения

Доступ к меню Setting (Настройка) (может выполняться при нахождении гарнитуры на пациенте или при простое аппарата)


Чтобы включить полный доступ к параметрам

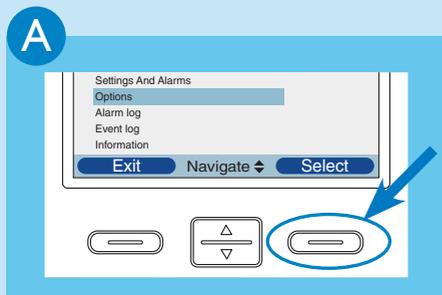


Перейдите к пункту **Options** (Параметры) и нажмите **Select** (Изменение параметров)

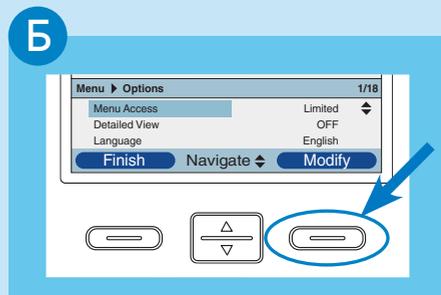


Нажмите **Modify** (Изменение параметров), чтобы открыть пункт **Menu Access** (Режим доступа к меню)

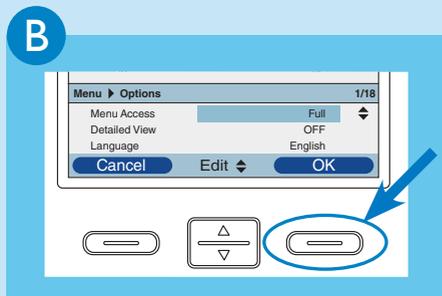

При помощи  выберите **Full** (Полный) или **Limited Access** (Ограниченный) доступ и нажмите **OK** (OK) для подтверждения

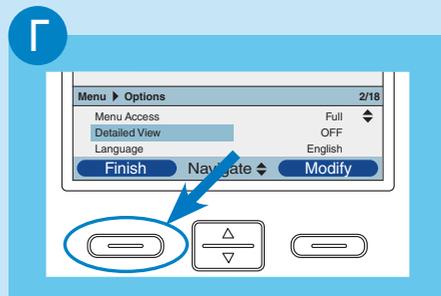

Нажмите **Finish** (Завершить) и **Exit** (Выход), чтобы вернуться к **исходному экрану**

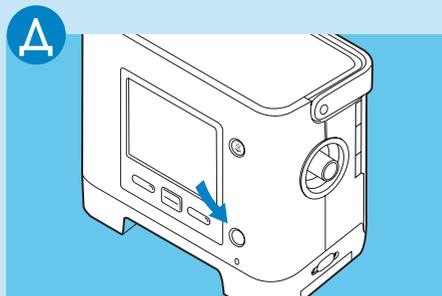


Нажмите  для запуска вентиляции **или** продолжите перемещение по меню для настройки параметров вентиляции

4


Настройка параметров предписания

А

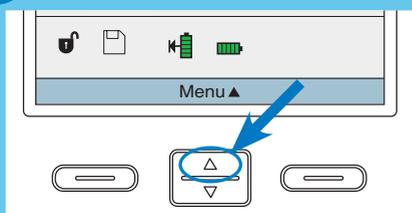


При открытом главном окне нажмите кнопку **Menu** (Меню)

Б

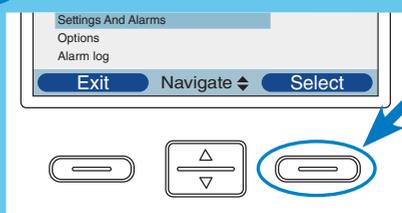


Выберите пункт **Settings And Alarms** (Параметры настройки и сигналов оповещения)

Д

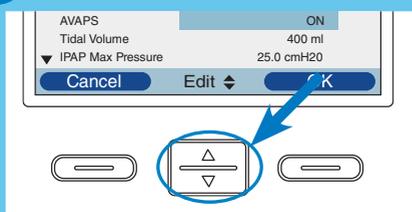


При помощи  измените значение или состояние параметра

Е

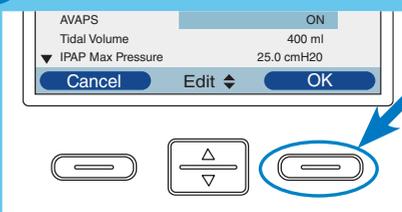


Нажмите **OK** (OK) для подтверждения соответствия требованиям нового параметра


Двойные предписания

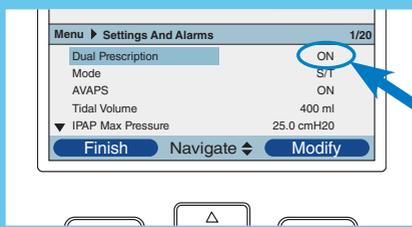


Если параметр **Dual Prescription** (Двойные предписания) имеет значение «ON» (Включена), необходимо настроить оба предписания согласно приведенным ранее пояснениям

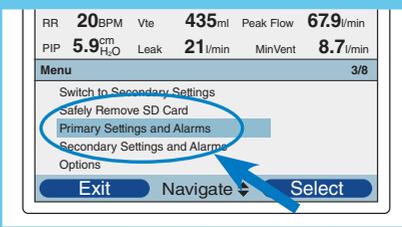


Выполните задание параметров как основного (Primary), так и дополнительного (Secondary) предписаний

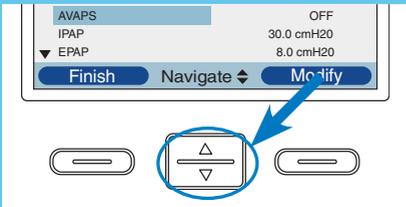В

Выполните прокрутку вверх или вниз при помощи  для перехода по параметрам и сигналам оповещения

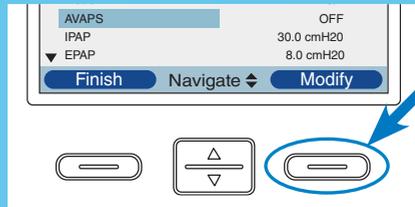Г

Для изменения значения параметра, подсвеченного синим цветом, нажмите **Modify** (Изменение параметров)

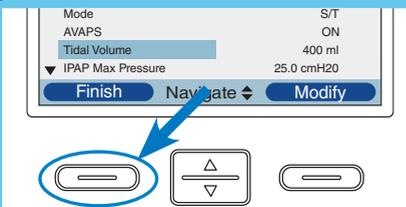Ж

Нажмите **Finish** (Завершить) и **Exit** (Выход) для возврата к главному окну

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 США



Respironics Deutschland
Gewerbestr. 17
82211 Herrsching, Германия



1071475
DSF 7/20/10
Russian